


# Gouttes d'huile dans l'eau faites au Couette par Diana et rendues fluos

Image prise avec le videomicroscope2  
Obj 20 X  
Crop sur Image j  
Filtre Cy3

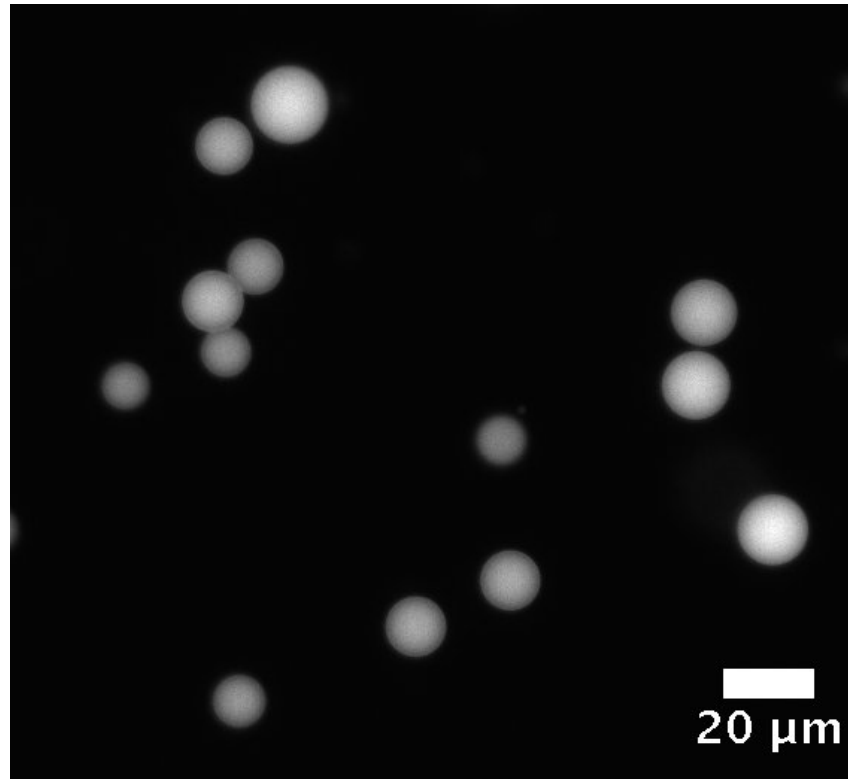

NAS/microscope/20160210/GOUTTEDIANAvinx2-1cropbar

## Protocole pour rendre les gouttes fluo avec du Nile Red

Préparer une solution de Nile Red dans DMSO (15mg/mL). Recouvrir le tube de papier alu.

Dans 1mL de PEF à 0,3%, ajouter

- 100uL d'émulsion concentrée de Diana (16/02/15, 1% alginate, 100rpm)
- 1uL de la solution de Nile Red

Laisser mélanger au rotor pendant 1h dans l'obscurité